


EGYKOMPONENSŰ, FÉNYRE KÖTŐ UNIVERZÁLIS RAGASZTÓSZER

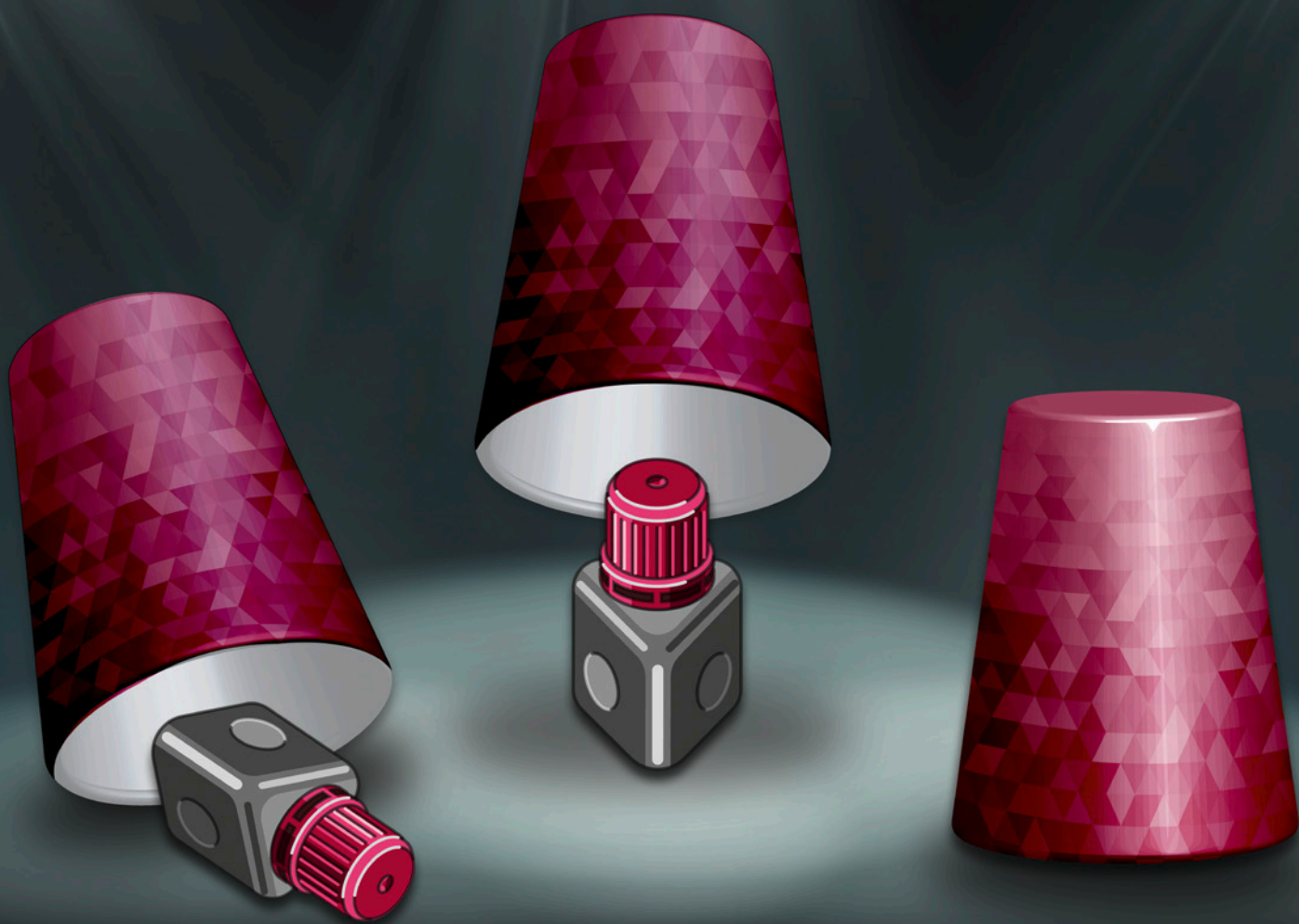

MINDIG A HELYES VÁLASZTÁS

ONE COAT 7 UNIVERSAL

Többfunkciós


 **COLTENE**

Adagolási formák

Új és egyedülálló palack

Az optimalizált cseppentővel ellátott, új, ergonómikus palackot a folyamatos áramlás nélküli, precíz, tiszta adagolás különbözteti meg.

- Maximum 300 alkalmazás*
- Egyszerűsített kezelés
- Ergonómikus

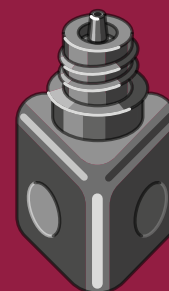

Praktikus egyszeri dózis

A ONE COAT 7 UNIVERSAL kapható praktikus egyszeri dózisban, higiénikus egyszeri használatra. Egyszerű, univerzális, hatékony teljesítmény a praxis napi rutinjában.

- Felhasználóbarát
- Egyszerű alkalmazás
- Higiénikus



* Forrás: belső adatok

A sokoldalú


Egyetlen bond minden alkalmazási technikához

- Rendkívüli kötési értékek zománcon és dentinen
- Kiváló széli zárás
- Minimalizált műtét utáni érzékenység

A ONE COAT 7.0 rendszer optimalizálásával a megbízható, többfunkciós ONE COAT 7 UNIVERSAL bond most minden javallathoz rendelkezésre áll.

A varázsháromszög


Függetlenül attól, hogy önsavazás, totális savazás vagy szelektív savazás szükséges, a ONE COAT 7 UNIVERSAL minden igényt kielégít. Erőfeszítés nélküli kötés sokféle anyaghoz (pl. arany, titán, kerámia, cirkónium-oxid és kompozit), teljes mértékben további primer vagy szilán hozzáadása nélkül.

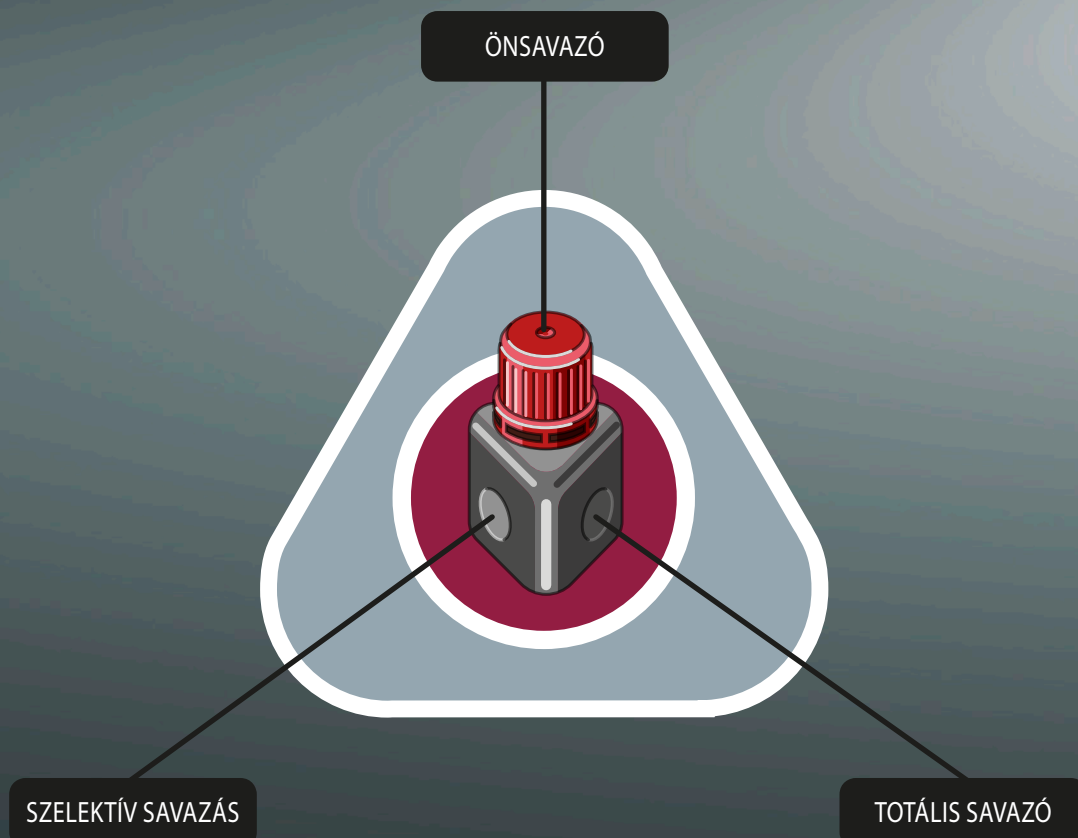

Technikai adatok


A teszt módszer

A diagramok a Watanabe szerinti nyírási bondozási erő (SBS/MPa) képviselik. A magas kötési szilárdság jelzi, hogy jó tartalom van jelen a kötést létrehozó szer és a fog anyaga között. Ez kritikus fontosságú a fogászati restaurációk jó kötése szempontjából.

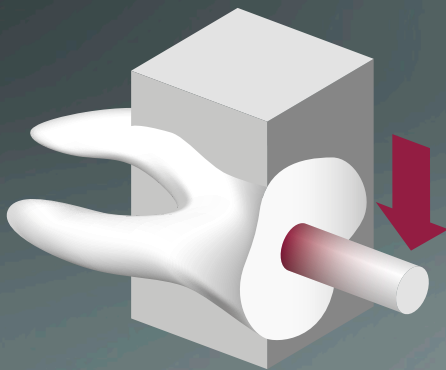


Sematikus SBS reprezentáció

Nyírási bondozási erő (SBS/MPa) az önsavazási technika használatával

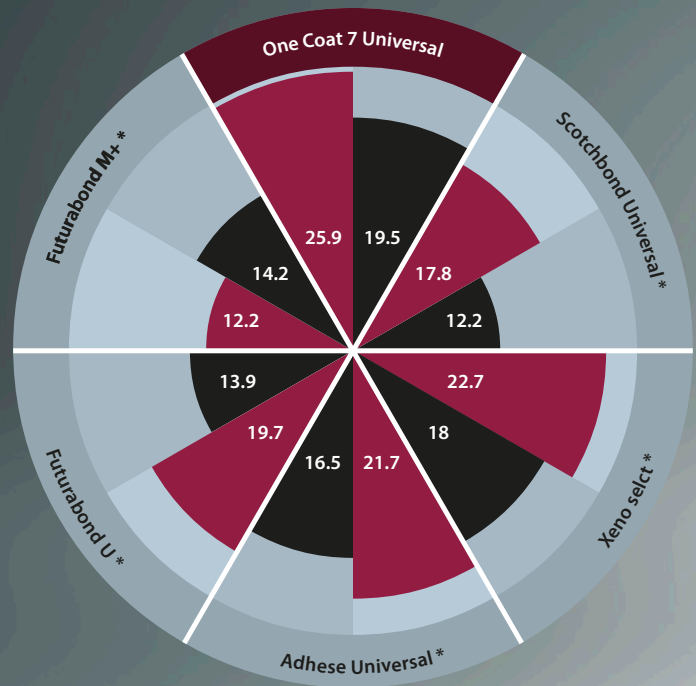

Nyírási bondozási erő (SBS/MPa) a totális savazási technika használatával

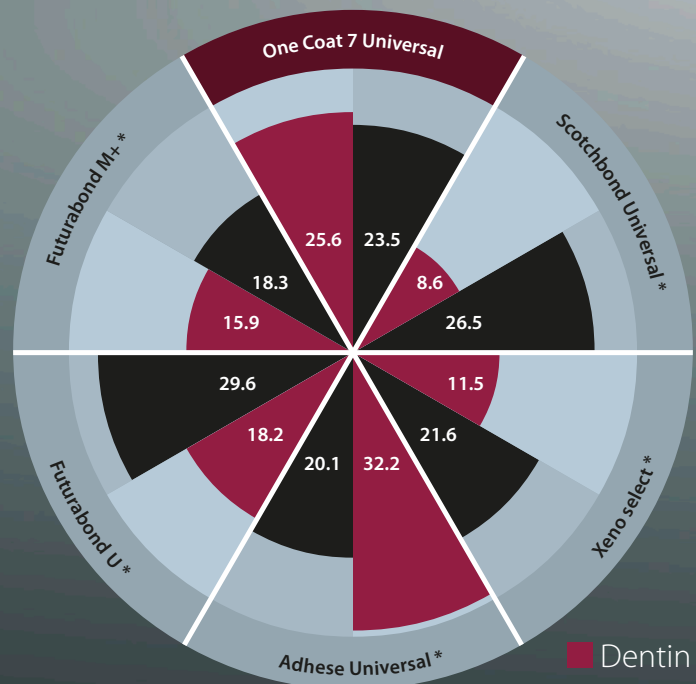

* Nem bejegyzett COLTENE védjegyek

Forrás: belső adatok

■ Dentin
■ Zománc

Tulajdonságok

Antibakteriális*

MEGTÖRTÉNT A ONE COAT
7 UNIVERSAL antibakteriális*
hatásának ellenőrzése.



* Az ellenőrzés az antimikrobiális aktivitásra vonatkozó, *S.epidermidis*-t használó szaporodási vizsgálattal történt, a QualityLabs, Németország laboratóriumában.

Kémiai kötés

A speciális One Coat 7.0 Activator biztosítja a kompatibilitást kémiaailag kötő anyagokkal.



ONE COAT 7 UNIVERSAL
tartalmazza:



*Methacryloyl-oxydecyl-dihydrogenphosphat

Rendelési információ



60019538 ONE COAT 7 UNIVERSAL bevezető készlet

1 × 5 ml One Coat 7 Universal
1 × 2,5 ml Etchant Gel S
1 × 20 applikációs csúcs
1 × 50 kefe, fekete
1 × keverőtál
1 × fedél a keverőtálhoz

60019539 ONE COAT 7 UNIVERSAL utántöltés

1 × 5 ml One Coat 7 Universal


60019540 ONE COAT 7 UNIVERSAL egyszeri dózis

50 × 0,1 ml One Coat 7 Universal egyszeri dózis
1 × 50 kefe, fekete



7054 ONE COAT 7.0 Activator készlet

1 × 3 ml One Coat 7.0 Activator
1 × 50 kefe, fekete

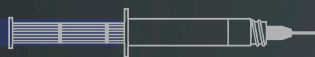

7373 Etchant Gel S készlet

2 × 2,5 ml fecskendő
1 × 20 applikációs csúcs

7634 kefe, fekete

1 × 50 kefe, fekete



© 2016 Coltène/Whaledent AG
www.coltene.com | oc7universal.coltene.com

Coltène/Whaledent AG
Feldwiesenstrasse 20
9450 Altstätten / Switzerland
T +41 71 757 53 00
F +41 71 757 53 01
info.ch@coltene.com

Coltène/Whaledent Inc.
235 Ascot Parkway
Cuyahoga Falls, Ohio 44223 / USA
T +1 330 916 8800
F +1 330 916 7077
info.us@coltene.com



 **COLTENE**